

Användargrupp

Lämplig för professionell läkemedelsbehandling inom beroendevården för att minska missbruk av läkemedel. Rätt medicin vid rätt tid. När medicinen är tagen, kan påföljande dos endast fås ut vid nästa tilltänkta tidpunkt.



Med-O-Wheel Smart Secure – Medicinklockan

- Kliniskt testad
- Utvecklad för professionellt bruk
- Låsbar
- Portionerar ut medicinen endast vid rätt tidpunkt
- Möjliggör en längre tids hemmedicinering
- Kan portionera enstaka tabletter eller medicindoser för 1 – 28 dagar åt gången
- 1 – 4 medicindoser per dag
- Exempel:
 - Daglig Suboxone medicinering med tidsbegränsat intag på 3 timmar:
 - Medicinklockan ställs in på kl 09.00
 - Medicinen kan fås ut mellan kl 08.00 – 11.00. Genom ett tryck på locket, snurrar dosskivan så att medicinen blir tillgänglig för patienten.
 - Därefter snurrar dosskivan tillbaka till sitt grundläge så att den tomma luckan inte längre blir synlig.
 - Nästföljande dos är inte tillgänglig förrän samma tid dagen efter.
- Finns även en GSM-modell med möjlighet att i realtid följa medicinintagen via web-portalen




Addoz Medicinklocka

- inställningsbar för 1-4 dagliga doser
- låsbar
- dosskivan finns med 14 eller 28 fack
- vikt 296 g
- mått \varnothing 120 x 132 x 60 mm
- alkaliska batterier typ 2 x AA
- batteriernas hållbarhet cirka ett år



Addoz Dosskiva

- lättanvänd medicindoserare
- med 14 eller 28 fack
- stöttålig och kan rengöras i diskmaskin
- portionerar ut medicinen ur ett fack åt gången
- vikt 110 g
- mått \varnothing 125 x 35 mm

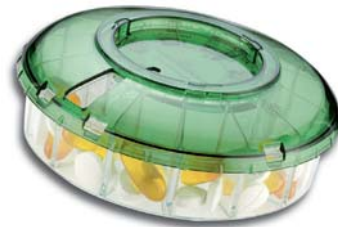

AZ10114-1



Med-O-Wheel Smart Secure – Medicinklockan - säker medicinportionerare

